

ACP-80



Pastillero electrónico con alarma.

Introducción:

El pastillero Alecto ACP-80 le permite almacenar medicinas para 5 momentos del día. Puede programar cinco horas diferentes en las que debe sonar la alarma, al tiempo que la pantalla le indica qué medicina debe tomar.

Este horario se repite diariamente hasta que se programe un horario diferente.

Los compartimentos del pastillero ACP-80 solamente son adecuados para medicamentos secos (patillas, cápsulas), no para líquidos ni ungüentos.

Alimentación:

El ACP-80 se alimenta con 2 baterías: Una pila de botón de litio CR2025 para la función de reloj y temporizador. Esta batería ya se proporciona instalada de fábrica, pero sólo se puede utilizar después de quitar la tira aislante.


La otra es una batería de 1,5 V (tamaño AAA) para la alarma de sonido y las vibraciones, y para la iluminación de la pantalla. Esta batería no está incluida con la unidad. Por favor utilice una batería alcalina, nunca una recargable.

Uso por primera vez:

1. utilice el control deslizante  para abrir el ACP-80
2. quite la tapa del compartimiento de la batería
3. active la pila de botón tirando de la banda aislante del ACP-80
4. instale una batería alcalina de 1.5V, prestando atención a la polaridad (+ y -)

Sustitución de la pila de botón:

1. deslice la lengüeta blanca hacia la derecha hasta que se suelte del lado izquierdo
2. retire esta pestaña y vuelva a colocar la pila de botón (el + hacia arriba)
3. vuelva a colocar la lengüeta hacia la derecha en la apertura, empuje hacia abajo y deslice hacia la izquierda hasta que encaje la batería de nuevo
4. ahora presione una vez el botón **RESET** y vuelva a configurar el reloj y las horas de la alarma

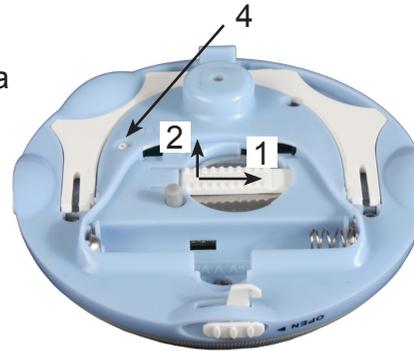

No deseche las pilas usadas como residuos domésticos, llévelos a un punto de recogida de pequeños residuos químicos.



Configuración:

reloj:

1. desbloquee los botones deslizando el interruptor  a la izquierda
2. presione y mantenga pulsado el botón  durante 2 segundos; el primer dígito comienza a parpadear en la pantalla
3. gire el casquillo blanco para ajustar las horas
4. pulse brevemente el botón ; la visualización de los minutos comienza a parpadear

5. gire el casquillo blanco para ajustar los minutos
6. presione el botón  para guardar los ajustes

horas de alarma:

1. desbloquee los botones deslizando el interruptor  a la izquierda
2. mantenga pulsado el botón  durante 2 segundos hasta que comience a parpadear la hora de la alarma **1**
3. gire el casquillo blanco para ajustar la hora de alarma para el primer medicamento del día; la hora de la alarma se ajusta en incrementos de media hora
4. pulse brevemente el botón ; la hora de la alarma **2** comienza a parpadear
5. repita las instrucciones 3 y 4 para las horas de las alarmas **2**, **3**, **4** y **5** (*)
6. presione el botón  para guardar los ajustes

*: *En caso de necesitar menos de 5 horas de alarma, siga girando el casquillo hasta que aparezca --:-- en la pantalla, esta hora de alarma queda desactivada*

para cambiar las horas de la alarma:

1. desbloquee los botones deslizando el interruptor  a la izquierda
2. mantenga pulsado el botón  durante 2 segundos hasta que comience a parpadear la hora de la alarma **1**
3. presione repetidamente el botón  hasta que comience a parpadear la hora de la alarma que desea cambiar
4. gire el casquillo blanco para ajustar la nueva hora de alarma (*)
5. presione el botón  para guardar las nuevas horas de alarma

*: *Si desea borrar una hora de alarma por completo, continúe girando el anillo hasta que la pantalla muestre --:--; esta hora de alarma se desactiva*

señal de alarma:

Utilice el control deslizante    para configurar su alarma deseada. Este ajuste también se indicará en la pantalla:

- : a la hora de la alarma, sonará la alarma acústica durante un máximo de 30 segundos.
- : a la hora de la alarma, el pastillero comenzará a vibrar durante un máximo de 30 segundos.
- : a la hora de la alarma, la alarma acústica sonará alternándose con la vibración del pastillero durante un máximo de 30 segundos

Guardar los medicamentos en el pastillero:

1. gire con cuidado la tapa del compartimento de las píldoras hasta que se abra el compartimento 1
2. introduzca en este compartimento el medicamento que desee tomar en primer lugar, de acuerdo con la hora de la alarma que ha establecido. 1
3. gire la cubierta del compartimento de las píldoras hasta que se abra el segundo compartimento e introduzca el medicamento que deba tomar según la hora establecida de la alarma 2
4. si es necesario, repita este proceso para los compartimentos 3, 4 y 5.
5. Finalmente, gire la cubierta de las píldoras de nuevo a la posición inicial (los 5 compartimentos están cerrados)

Funcionamiento:

cuando llegue la hora de la alarma, el pastillero comienza a emitir una alarma, vibra o comienza a sonar y vibrar de forma alternativa durante 30 segundos mientras que aparece el símbolo  en la pantalla.

si no escucha la alarma, se repetirá dos veces más después de 5 minutos. Si sigue sin escucharla, los dos puntos en la hora de la alarma siguen parpadeando para indicarle que “no ha visto” la alarma

si pulsa los botones  o  durante una alarma, la señal de alarma se detendrá pero se repetirá transcurridos 5 minutos

si gira la cubierta para abrir un nuevo compartimento, la señal de alarma se detendrá y la hora de la alarma cambiará a -:-

Si gira la cubierta 15 minutos antes de la hora establecida para la alarma, la hora de la alarma desaparecerá y se mostrará -:-, el ACP-80 asume que ya ha tomado su medicación y esta alarma ya no se repetirá ese mismo día.

restauración automática: cada mañana a las 0:13 las alarmas de los medicamentos se restauran automáticamente y se muestran de nuevo las horas programadas, preparadas para un nuevo día

Medición de los latidos del corazón:

1. desbloquee los botones deslizando el interruptor  a la izquierda
2. pulse brevemente el botón ; aparecerá en la pantalla el símbolo 
3. coloque la parte superior de su dedo índice sobre el sensor (cubra completamente el sensor); el símbolo  comienza a parpadear
4. después de 15 a 60 segundos, se escucha un sonido y se muestra en la pantalla su pulso cardíaco.



La pantalla volverá a mostrar la hora transcurridos varios segundos.

Bloqueo del pastillero:

En el lateral del pastillero, deslice el interruptor  en la dirección de la flecha para bloquear los botones y asegurarse de que no puede cambiar los ajustes por accidente.

Iluminación de la pantalla:

1. desbloquee los botones deslizando el interruptor  a la izquierda
2. pulse brevemente el botón  para encender la iluminación de la pantalla durante 10 segundos.

Soporte de mesa:

Es posible extraer la parte del reloj / alarma del ACP-80 de la parte de los medicamentos y usarlo como un reloj independiente mediante el soporte de mesa.



Restauración manual:

En caso de un posible error en el ACP-80, puede que tenga que reponer los componentes electrónicos.

1. utilice el control deslizante  para abrir el ACP-80
2. utilice un objeto puntiagudo para presionar brevemente el botón **RESET**
3. ACP-80 se restablecerá después de varios segundos



Atención: A continuación, se eliminan tanto los ajustes del reloj como las horas de la alarma, por lo que deberá programar de nuevo la unidad.

Mantenimiento:

- Si la señal de alarma es débil o no funciona en absoluto y la iluminación de la pantalla es deficiente o no funcional, reemplace la pila de 1,5V AAA.
- Si las lecturas del reloj y las horas de alarma programadas se ven débiles en la pantalla, reemplace la pila de botón.
- En caso de un posible error, presione primero el botón **RESET** para restaurar los componentes electrónicos.
- Tenga en cuenta que el mal funcionamiento de un botón también puede deberse a que el interruptor  esté en la posición correcta.